

JIANLIAN HOMECARE PRODUCTS CO. LTD.

Add: Xiebian Industrial Park, Dali, NanHai District, Foshan, Guangdong, P.R.China
Tel: 0086 757 83668093 Fax: 0086 757 83668083 Email:sales@gdjianlian.com

Instruction of Commode Chair

Purpose of the device

The purpose of the commode chair is to help the people to toilet, make the people in need by themselves.

Descriptions: Steel Commode chair

Model No.:JL897





JIANLIAN HOMECARE PRODUCTS CO. LTD.

Add: Xiebian Industrial Park, Dali, NanHai District, Foshan, Guangdong, P.R.China
Tel: 0086 757 83668093 Fax: 0086 757 83668083 Email:sales@gdjianlian.com

Transportation

It can transportation by car, and other public transport.

Installation and Using Method

1. Take the commode out of carton, please refer to the Illustration (1)
2. Open the brace, please refer to the Illustration (2)
3. Fix the brace by the locking pin, assemble the bucket in the seat please refer to illustration (3), (4), (5)

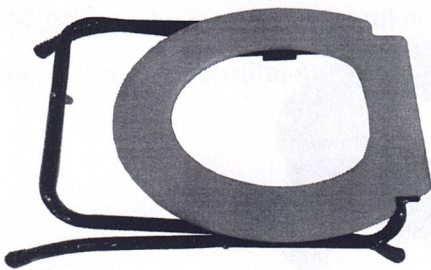


Illustration 1

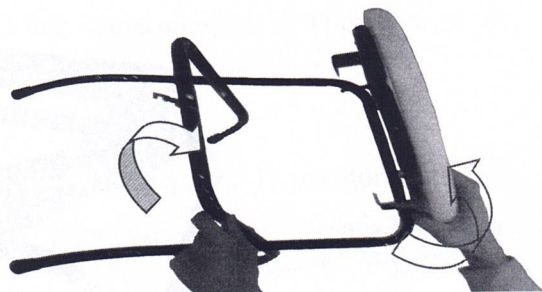


Illustration 2

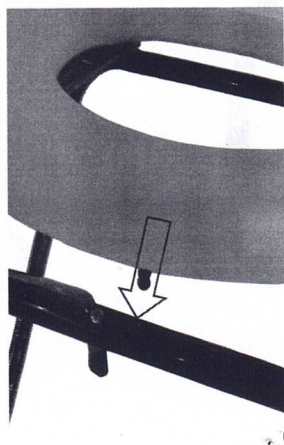


Illustration 3

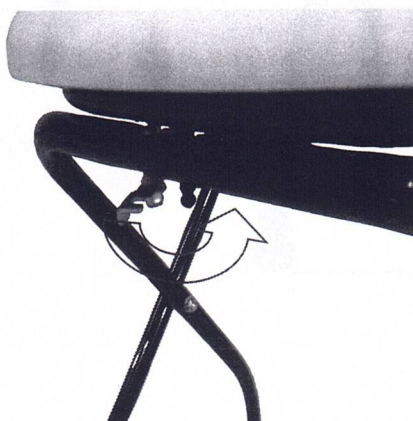


Illustration 4



Illustration 5





JIANLIAN HOMECARE PRODUCTS CO. LTD.

Add: Xiebian Industrial Park, Dali, NanHai District, Foshan, Guangdong, P.R.China
Tel: 0086 757 83668093 Fax: 0086 757 83668083 Email:sales@gdjianlian.com

Training

When first use commode chair, please make sure there is somebody who help the user on how to use the commode. Please use the commode on flat place.

Disposal

Unlock the pin and fold the brace. Please refer to the illustration (6), (7) and (8)

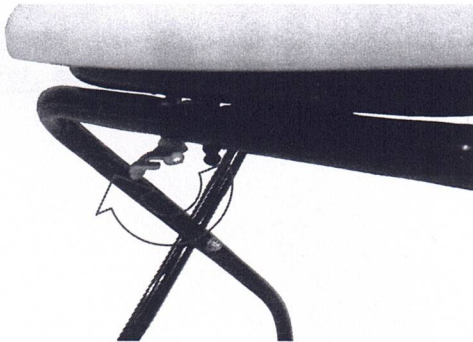


Illustration6

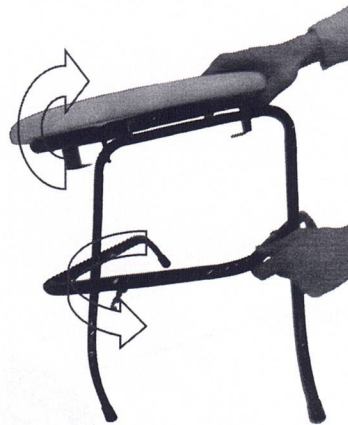


Illustration 7

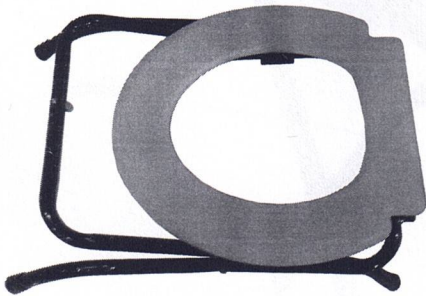


Illustration 8

Storage

Storing the commode chair at a dry and ventilated environment ,
Storage Temp about 5℃ to 55℃

Maintenance

- a. Check the tightness of the screws and spring lock, the stabilization of the walker before using.
- b. Regular cleaning will prevent the dust of tubes or reveal loose and enhance



JIANLIAN HOMECARE PRODUCTS CO. LTD.

Add: Xiebian Industrial Park, Dali, NanHai District, Foshan, Guangdong, P.R.China
Tel: 0086 757 83668093 Fax: 0086 757 83668083 Email:sales@gdjianlian.com

the smooth operation of your commode chair.

WARNING

ALL warnings and cautions in this manual must be followed.
DO NOT attempt to move up or down an incline with a water, ice or oil film.
DO NOT stand on the frame of the commode chair.

JIANLIAN HOMECARE PRODUCTS CO. LTD.

Adresa: Xiebian Industrial Park, Dali, NanHai District, Foshan, Guangdong, P.R.China
Tel: 0086 757 83668093 Fax: 0086 757 83668083 Email:sales@gdjianlian.com

Traducere din limba engleză

Instrucțiuni Scaun toaletă

Scopul dispozitivului

Scopul scaunului este de a oferi ajutor persoanelor care au nevoie.

Descrie: Scaun-toaletă din oțel

Nr. Model.:JL897





JIANLIAN HOMECARE PRODUCTS CO. LTD.


Adresa: Xiebian Industrial Park, Dali, NanHai District, Foshan, Guangdong, P.R.China
Tel: 0086 757 83668093 Fax: 0086 757 83668083 Email:sales@gdjianlian.com

Transportul


Poate fi transportat cu mașina sau alte mijloace de transport.

Instalarea și folosirea


1. Scoateți scaunul din cutie. A se vedea Imaginea (1).
2. Desfaceți bretelele. A se vedea Imaginea (2).
3. Fixați bretelele cu știftul de blocare, instalați găleata la scaun. A se vedea Imaginile (3), (4), (5).

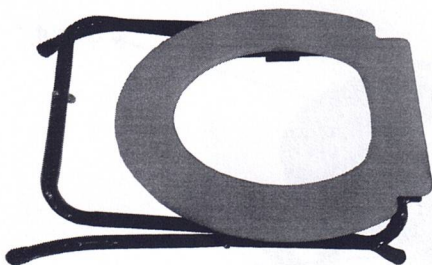


Imaginea 1

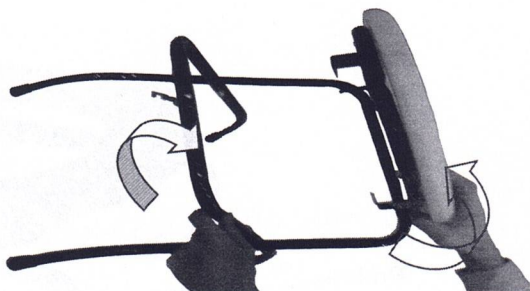

Imaginea 2

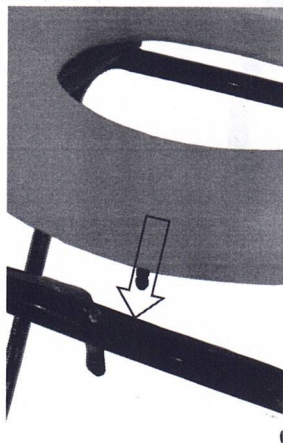

Imaginea 3

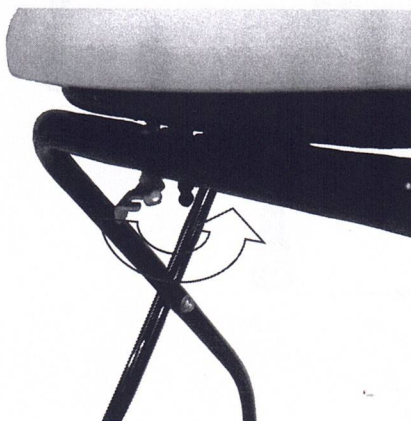

Imaginea 4



Imaginea 5

JIANLIAN HOMECARE PRODUCTS CO. LTD.


Adresa: Xiebian Industrial Park, Dali, NanHai District, Foshan, Guangdong, P.R.China
Tel: 0086 757 83668093 Fax: 0086 757 83668083 Email:sales@gdjianlian.com

Pregătirea pentru folosire


Înainte de prima utilizare, asigurați-vă că utilizatorul va primi ajutor cu privire la folosirea scaunului din partea altei persoane. Vă rugăm folosiți scaunul pe suprafețe plane.

Strângerea dispozitivului


Desfaceți știftul și pliați bretelele. A se vedea imaginile (6), (7) și (8).

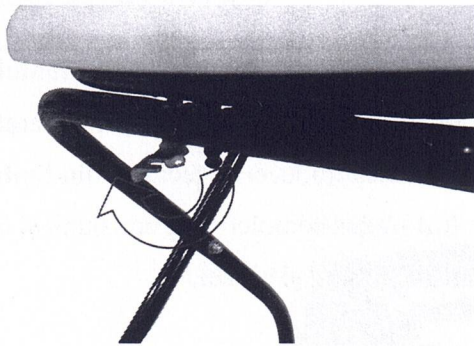

Imaginea 6

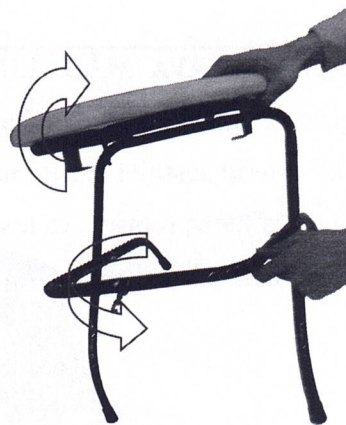

Imaginea 7

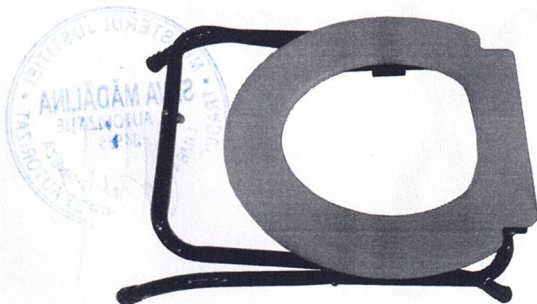

Imaginea 8

Depozitarea

A se depozita într-un mediu uscat și ventilat.
Temperatura de depozitare de la 5°C la 55°C.

Întreținerea

- Înainte de utilizare verificați dacă șuruburile sunt bine strânse, știftul blocat și dacă scaunul este stabil.

JIANLIAN HOMECARE PRODUCTS CO. LTD.

Adresa: Xiebian Industrial Park, Dali, NanHai District, Foshan, Guangdong, P.R.China
Tel: 0086 757 83668093 Fax: 0086 757 83668083 Email:sales@gdjianlian.com

- b. Curățarea periodică va preveni așezarea prafului în tuburi și slăbirea scaunului, îmbunătățind buna funcționare.

ATENȚIE

TOATE avertismentele și precauțiile din acest manual trebuie respectate.
NU folosiți pe suprafețe înclinate, alunecoase sau uleioase.
NU vă așezați în picioare pe cadrul scaunului.

Subsemnata, **SAVA MĂDĂLINA**, interpret și traducător autorizat pentru limbile engleză și chineză, în temeiul autorizației nr. 34585 din data de 04/10/2012, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni, și că, prin traducere, înscrisului nu i-au fost denaturate conținutul și sensul.

Interpret și Traducător autorizat,

Sava Mădălina

